



EN EXTENSION

Le tenseur est introduit entre les coupes osseuses, fémorale distale et tibiale proximale.

Les ligaments collatéraux sont progressivement mis en tension.

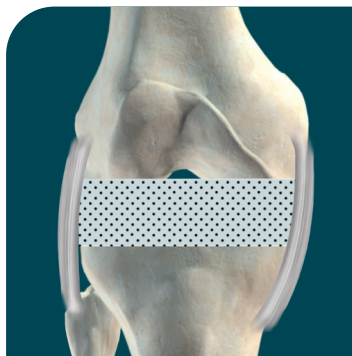

Les coupes osseuses révèlent un espace rectangulaire en extension

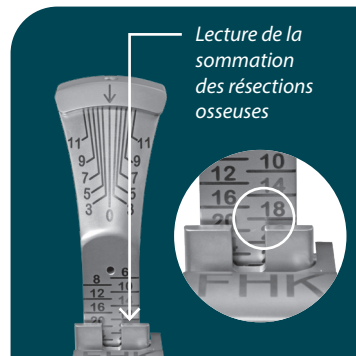

Lecture de la somme des résections osseuses

Rappel : l'encombrement minimal pour la prothèse FHK est de 18mm (8mm fémur + 10mm tibia)

EN FLEXION


Le tenseur est introduit entre condyles fémoraux postérieurs et coupe tibiale proximale.

Les ligaments collatéraux sont progressivement mis en tension.

La valeur angulaire relevée sera réglée sur le guide d'indexation fémoral : il s'agit de la rotation fémorale externe.



L'asymétrie des condyles postérieurs révèle un espace trapézoïdal en flexion

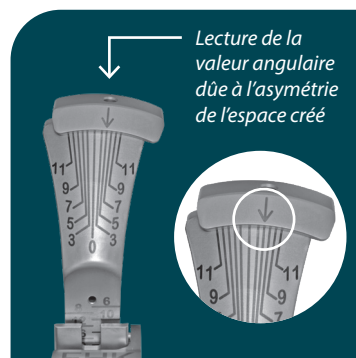

Lecture de la valeur angulaire due à l'asymétrie de l'espace créé

Rappel : La hauteur doit s'approcher des 10mm (encombrement minimal tibial pour FHK®)

Le tenseur ligamentaire FHK® permet ainsi de lier les coupes osseuses au sein d'une enveloppe ligamentaire équilibrée, pendant tout le mouvement.



Un release complémentaire peut également être effectué du côté le plus serré jusqu'à l'obtention d'une valeur nulle ou proche de 0° sur le tenseur ligamentaire.



DISTRIBUTEURS
DISTRIBUTORS

GROUPE
FH ORTHO™

FR, FH ORTHO SAS
3 rue de la Forêt - Zone Industrielle
BP 50009
68990 Heimsbrunn CEDEX - FRANCE
Tél. +33 (0)3 89 81 90 92
info@fhortho.com
www.fhortho.com

USA, FH ORTHOPEDICS INC.
OrthoEx
7327 E Tierra Buena Lane
Scottsdale, Arizona 85260 - USA
Phone: +1 (412) 965-0950
customerservice@fhortho-us.com
www.fhortho.com

PL, FH ORTHO POLSKA
Ul. Garbary 95/A6,
61-757 Poznan - POLSKA
Phone: +48 61 863 81 27
Fax: +48 61 863 81 28
biuro@implants24.pl
www.fhortho.com



FABRICANT
MANUFACTURER

FR, FH INDUSTRIE
6 rue Nobel, Z.I. de Kernevez
29000 QUIMPER - FRANCE
Tél. +33 (0)2 98 55 68 95
contact-fhi@fhortho.com
www.fhortho.com