PIED

# CHIRURGIE DE L'AVANT-PIED

# be POD



VIS AVANT-PIED 3A ET PERCUTANÉE



## CONCEPT DE VIS AU MOTEUR POUR OSTÉOTOMIES DE L'AVANT-PIED

- Les vis **autoforeuses et autotaraudeuses** de la gamme bePOD permettent de fixer les ostéotomies métatarsiennes et phalangiennes, dans le but de réaliser une ostéosynthése stable.
- Deux principes de vis canulée autoforeuse et autotaraudeuse sont proposés :
  - une vis dite "3A", à pas différentiel, Autocompressive, Autoforeuse et Autotaraudeuse,
  - une vis dite " percutanée", à filet continu, Autoforeuse et Autotaraudeuse.

# **Ø**2,5 мм

11 tailles : lg 10 mm à 30 mm

## VIS 3A

• AUTOCOMPRESSIVE - AUTOFOREUSE - AUTOTARAUDEUSE

Vis canulée à pas différentiel autocompressive, autoforeuse et autotaraudeuse, avec guidage sécurisé sur broche permettant une compression sous contrôle.

#### Indications:

Chevron, mini-chevron, scarf, base, et toutes ostéotomies compressives : métatarsiennes et phalangiennes, distales et proximales.



# VIS PERCUTANÉE


• AUTOFOREUSE - AUTOTARAUDEUSE

Vis canulée à pas continu, avec guidage sécurisé sur broche, autoforeuse et autotaraudeuse.

#### Indications:


Ostéotomies non compressives : métatarsiennes et phalangiennes, distales et proximales.



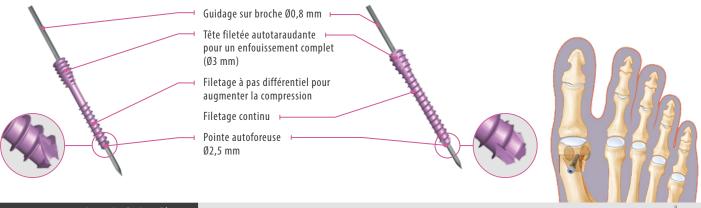

# MINI KIT BE POD Ø2,5

RÉF.		DÉSIGNATION
1	265 614	Broche Ø0.8 mm lg 80 mm
2	264 257	Broche Ø0.8 mm lg 130 mm
3	265 788	Tournevis canulé
4	264 253	Tournevis moteur
5	265 613	Indicateur de mesure universel 80/130 mm
6	265 615	Foret pour vis Ø2.5 mm
7	266 492	Tournevis ablation T7 Torx
8	264 585	Panier mini-kit 3A/Percut Ø2.5 mm

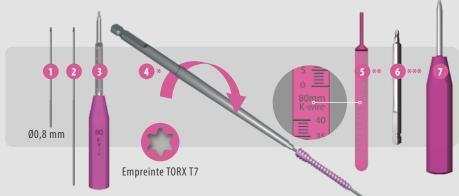

- \* Si le tournevis moteur se désengage en cours de vissage, il est recommandé de finaliser le vissage avec le tournevis à main (réf. 265 788)
- \*\* Contrôler la longueur de la broche utilisée (80 ou 130mm) avec l'indicateur de mesure universel
- \*\*\* Il est recommandé de préparer l'introduction de la tête de la vis à l'aide du foret, notamment si une insertion au moteur de la vis est souhaitée.

- · Les mêmes vis sont utilisées pour fixer les ostéotomies phalangiennes et métatarsiennes.
- Conçues en alliage de titane (TA6V), ces vis sont biocompatibles.
- · L'anodisation des vis est un facteur d'aide à la mise en place et facilite l'éventuelle ablation du matériel.
- Les vis sont délivrées sous emballage stérile et unitaire, permettant de répondre aux normes les plus rigoureuses de traçabilité.
- Elles sont disponibles en deux diamètres : Ø 2,5 mm et Ø 3 mm.

# Ø3 мм

13 tailles : lg 10 mm à 34 mm

## VIS 3A

• AUTOCOMPRESSIVE - AUTOFOREUSE - AUTOTARAUDEUSE

Vis canulée à pas différentiel autocompressive, autoforeuse et autotaraudeuse, avec guidage sécurisé sur broche permettant une compression sous contrôle.

#### Indications:

Chevron, mini-chevron, scarf, base, et toutes ostéotomies compressives : métatarsiennes et phalangiennes, distales et proximales.



# VIS PERCUTANÉE


AUTOFOREUSE - AUTOTARAUDEUSE

Vis canulée à pas continu, avec guidage sécurisé sur broche, autoforeuse et autotaraudeuse.

#### Indications:


Ostéotomies non compressives : métatarsiennes et phalangiennes, distales et proximales.



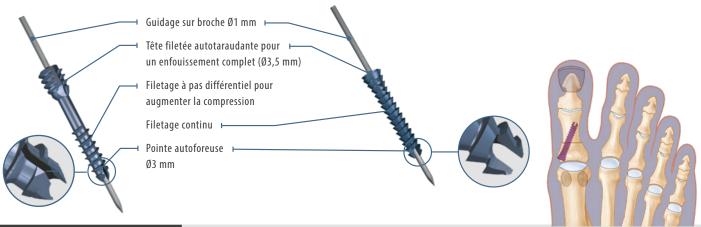


# MINI KIT BE POD Ø3

	RÉF.	DÉSIGNATION
1	254 920	Broche Ø1 mm lg 130 mm
2	256 213	Tournevis mesureur canulé
3	256 446	Tournevis moteur
4	257 408	Panier mini-kit 3A/Percut Ø3 mm

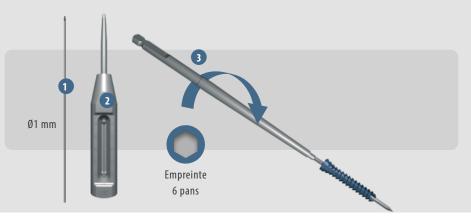



	·			
	VIS PERCUTANÉE Ø2,5			
RÉF.	DÉSIGNATION			
264 241	Vis bePOD percutanée canulée lg 10 mm			
264 242	Vis bePOD percutanée canulée lg 12 mm			
264 243	Vis bePOD percutanée canulée lg 14 mm			
264 244	Vis bePOD percutanée canulée lg 16 mm			
264 245	Vis bePOD percutanée canulée lg 18 mm			
264 246	Vis bePOD percutanée canulée lg 20 mm			
264 247	Vis bePOD percutanée canulée lg 22 mm			
264 248	Vis bePOD percutanée canulée lg 24 mm			
264 249	Vis bePOD percutanée canulée lg 26 mm			
264 250	Vis bePOD percutanée canulée lg 28 mm			
264 251	Vis bePOD percutanée canulée lg 30 mm			

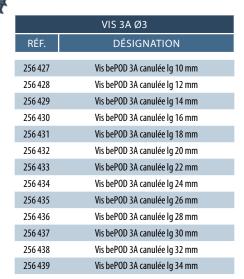

VIS PERCUTANÉE Ø3			
RÉF.	DÉSIGNATION		
256 454	Vis bePOD percutanée canulée lg 10 mm		
256 455	Vis bePOD percutanée canulée lg 12 mm		
256 456	Vis bePOD percutanée canulée lg 14 mm		
256 457	Vis bePOD percutanée canulée lg 16 mm		
256 458	Vis bePOD percutanée canulée lg 18 mm		
256 459	Vis bePOD percutanée canulée lg 20 mm		
256 460	Vis bePOD percutanée canulée lg 22 mm		
256 461	Vis bePOD percutanée canulée lg 24 mm		
256 462	Vis bePOD percutanée canulée lg 26 mm		
256 463	Vis bePOD percutanée canulée lg 28 mm		
256 464	Vis bePOD percutanée canulée lg 30 mm		
256 465	Vis bePOD percutanée canulée lg 32 mm		

Date de modification document : décembre 2022 - Fabricant : FH Industrie - Gamme : Pied - bePOD- Nom du produit : Vis bePOD - Destinataire : professionnels de santé - N° du marquage CE: 0459 - Classe du DM: IIb - Indications: ostéosynthèse du pied - DM pris en charge dans le cadre d'un GHS - Recommandations d'utilisation: il est fortement conseillé de lire l'étiquette et la notice d'instructions du produit.



### FR, FH ORTHO SAS

www.fhortho.com

3 rue de la Forêt 68990 HEIMSBRUNN - FRANCE Chicago - IL 60630 - USA Tél. +33 (0)3 89 81 90 92 Fax: +33 (0)3 89 81 80 11 info@fhortho.com

#### USA, FH ORTHO INC.

4908 N. Elston Tel.: +1 (773) 290 1039 / 844-77 FHINC Fax: +1 (708) 667 7618 info-us@fhorthopedics.com www.fhortho.com

#### **UK, FH ORTHO LTD**

www.fhortho.com

Unit 1b, Century Park, Valley way Swansea Enterprise Park, Swansea, SA6 8RP - UK Tel.: +44 (0) 1792 464792 Fax: +44 (0) 844 412 7674 customer-servicesUK@fhorthopedics.com

#### PL, FH ORTHO POLSKA

Ul. Garbary 95/A6, 61-757 Poznan - POLSKA Tel: +48 61 863 81 27 Fax: +48 61 863 81 28 biuro@implants24.pl www.fhortho.com