


Substitut méniscal biodégradable



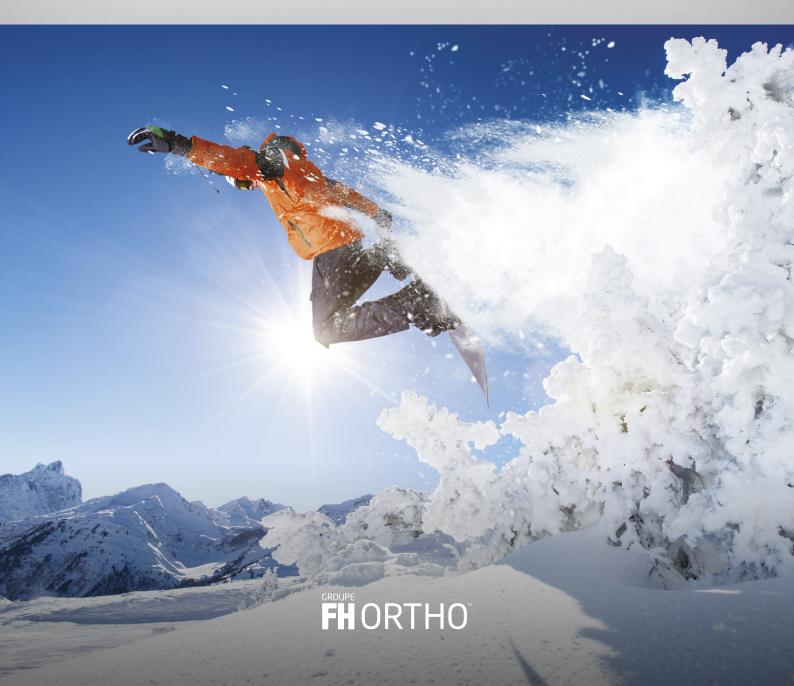


Ménisque médial

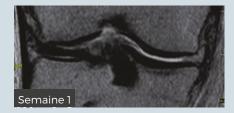

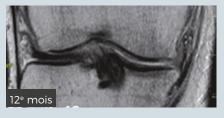

Ménisque latéral



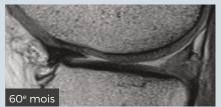

Un support qui permet la croissance d'un nouveau tissu méniscal. ²

Évite le remplacement dans la plupart des pertes méniscales. ²

Design anatomique, disponible pour ménisque droit et gauche.³

Matériel résistant, flexibilité du matériel pour une suture ou un système de fixation fiable. ³

LE SUPPORT ACTIFIT™ À 5 ANS

- Plus de 3500 patients implantés
- Amélioration fonctionnelle





Procédure simple avec des résultats reproductibles. 1,2


Amélioration fonctionnelle à 2 et 5 ans. 1,2

Résultats cliniques stables du suivi à moyen et long terme. 1


Les résultats IRM à 5 ans corroborent la régénération méniscale. 1

- 1. Presented at The 4th International Meniscus Meeting, Bologna, Italy, 31 Jan 2 Feb 2019.
- 2. Verdonk et al., Am J Sports Med. 2012 Apr: 40(4):844-853.
- 3. Data on file. R08024 Actifit Clinical Report on Safety and Performance.


Score IKDC

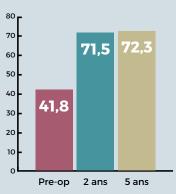

Douleur (VAS)

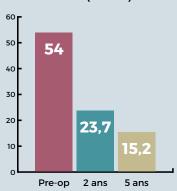

Score KOOS

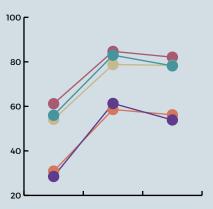

		Pre-op	2 years	5 years
-	Symptômes	56,0	83,0	78,2
-	Douleur	54,2	78,8	78,4
-	Fonction	61,2	84,7	82,1
-	Sports	28,5	61,3	53,9
-	Qol	30,9	58,6	56,2

RÉFÉRENCES COMMERCIALES

	réf. fournisseur	réf. FH ORTHO
ACTIFIT MÉNISQUE LATÉRAL	AL3508	263 495
ACTIFIT MÉNISQUE MÉDIAL	AM4508	263 496






ACTIFIT

Actifit™ est fabriqué en biomatériau polyuréthane. Une fois implanté dans la zone vascularisée du ménisque, Actifit™ favorise la croissance de vaisseaux sanguins ainsi que la guérison naturelle et la régénération du tissu méniscal.



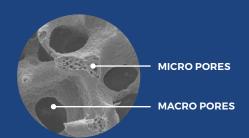



Forme et taille

- · Formes médiales (45,5 mm) et latérales (35,5 mm).
- · Dimensionnement intra-opératoire personnalisé.



Porosité

· Grande porosité pour une meilleure croissance des tissus.



Force

· Excellente force de suture.



Synthétique biocompatible

- · Aucun tissu humain ou animal.
- · Élimine le risque de transmission de maladies.
- · Se dégrade lentement sur 4 à 6 ans.



Stérile, prêt à l'emploi

· Durée de conservation de 37 mois. Stockage et accessibilité optimisés

Date de création document : septembre 2020 - Fabricant : Orteq Sports Medicine Ltd. - Gamme : Genou - Nom du produit : Actifit - Destinataire : professionnel de santé - N° du marquage CE: 2409 - Classe du DM: III - Indications: traitement des lésions douloureuses irréparables du ménisque et des pertes de tissu méniscal - Recommandations d'utilisation: il est fortement conseillé de lire l'étiquette et la notice d'instructions du produit.



FR, FH ORTHO SAS

3 rue de la Forêt 68990 HEIMSBRUNN - FRANCE | Chicago - IL 60630 - USA Tél. +33 (0)3 89 81 90 92 Fax: +33 (0)3 89 81 80 11 info@fhortho.com www.fhortho.com

USA, FH ORTHO INC.

4908 N. Elston Tel.: +1 (773) 290 1039 / 844-77 FHINC Fax: +1 (708) 667 7618 info-us@fhorthopedics.com www.fhortho.com

UK, FH ORTHO LTD

www.fhortho.com

Unit 1b, Century Park, Valley way Swansea Enterprise Park, Swansea, SA6 8RP - UK Tel.: +44 (0) 1792 464792 Fax: +44 (0) 844 412 7674 customer-services UK@fhorthopedics.com

PL, FH ORTHO POLSKA

Ul. Garbary 95/A6, 61-757 Poznan - POLSKA Tel: +48 61 863 81 27 Fax: +48 61 863 81 28 biuro@implants24.pl www.fhortho.com