

FICHE PRODUIT

# CorTTape®

SMALL  
90

SYSTEME RÉGLABLE DE  
FIXATION CORTICALE POUR  
LA RECONSTRUCTION DE LIGAMENT  
OU DE TENDON



## Caractéristiques du produit CorTTape® Small 90

- **Boucle auto-ajustable** de 15 à 90 mm.
- Haute résistance à la rupture (UHMWPE).
- **Conception de verrouillage à 3 points.** Construction tressée pour un placement facile et pour réduire le fluage des sutures.
- **Visibilité.** Motif croisé pour augmenter la visibilité de la boucle à l'intérieur du bouton en titane.
- **Emballage optimisé** pour réduire l'enroulement de la boucle et des fils de traction.

## Indications

CorTTape® Small 90 est indiqué pour la fixation d'os ou de tissu mou dans des procédures orthopédiques nécessitant une reconstitution de ligament ou de tendon.

CorTTape® Small 90 et CorTTape Stick sont recommandés pour la réparation du LCA technique DT3 pédiculé.


# CorTTape®

Small  
90

SYSTEME RÉGLABLE DE  
FIXATION CORTICALE POUR  
LA RECONSTRUCTION DE LIGAMENT  
OU DE TENDON

## Conditionnement

CorTTape® Small 90 et CorTTape® Stick sont livrés dans un double sachet, stérilisés à l'oxyde d'éthylène. Ne pas re-stériliser.

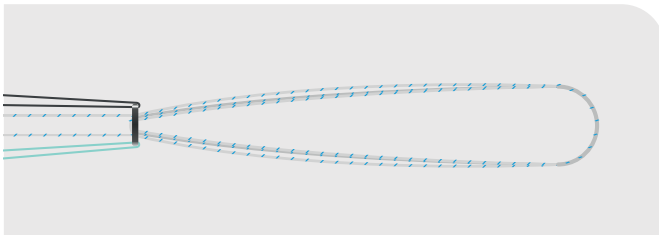


CorTTape® Small 90

- Longueur : 90 cm
- Deux tresses de réglage permettant d'ajuster la boucle bleue et blanche tressée en polymère non-résorbable (UHMWPE/ polyester)
- Réglage par l'extérieur (out/in).
- Une plaque en titane non revêtue (longueur 12 mm/largeur 4 mm/ épaisseur : 1,5 mm/ Ti-6Al-4V ELI)
- Deux fils de traction (noir et vert) non-résorbables en polyéthylène de haut poids moléculaire (100% UHMWPE)

Réf. FH ORTHO : 271 639

Réf. fournisseur : OBAL-90-Ti

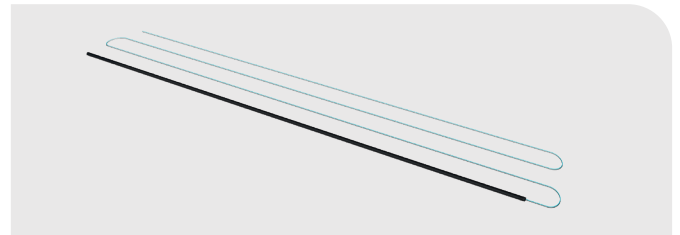

CorTTape® Stick

- Fil : Ø 0.50 (USP2)
- Longueur : 99 cm
- Couleur : bleu
- Tube noir 30 cm

Réf. FH ORTHO : 271 638

Réf. fournisseur : HS178

**Date de modification document :** février 2026 - **Fabricant :** Riverpoint - **Gamme :** Sport Surgery - **Nom du produit :** CorTTape SMALL - **Destinataire :** professionnels de santé - **N° du marquage CE :** CE0459 - **Classe du DM :** IIb - Remboursable par les organismes d'assurance maladie dans certaines situations : consultez les modalités sur le site ameli.fr - **Indications :** Les systèmes de fixation corticale servent à la fixation des tendons et des ligaments pendant les procédures de reconstruction orthopédique, par exemple, celle de reconstruction des ligaments croisés antérieurs (LCA) - **Recommandations d'utilisation :** il est fortement conseillé de lire l'étiquette et la notice d'instructions du produit



DISTRIBUTEURS  
DISTRIBUTORS

GRUPE  
**FH ORTHO™**

**FR, FH ORTHO SAS**  
3 rue de la Forêt - Zone Industrielle  
BP 50009  
68990 Heimsbrunn CEDEX - FRANCE  
Tél. +33 (0)3 89 81 90 92  
Fax : +33 (0)3 89 81 80 11  
info@fhortho.com  
www.fhortho.com

**USA, FH ORTHOPEDICS INC.**  
OrthoEx  
7327 E Tierra Buena Lane  
Scottsdale, Arizona 85260 - USA  
Phone: +1 (412) 965-0950  
customerservice@fhortho-us.com  
www.fhortho.com

**PL, FH ORTHO POLSKA**  
Ul. Garbary 95/A6,  
61-757 Poznan - POLSKA  
Phone: +48 61 863 81 27  
Fax: +48 61 863 81 28  
biuro@implants24.pl  
www.fhortho.com