



FICHE TECHNIQUE

Ext Liftfix

OUT IN - GENOU

SYSTÈME RÉGLABLE DE FIXATION CORTICALE
POUR LA RECONSTRUCTION DU LCA



Produit livré dans un double emballage
et stérilisé à l'Oxyde d'Éthylène.
Ne pas restériliser.

Descriptif du produit

Le dispositif est composé de :

- 1 bouton en titane (12 x 4 mm TA6V ELI),
- 1 boucle ajustable en UHMWPE (longueur minimale 10 mm),
- 2 fils de tractions (1 bleu/blanc et 1 blanc),
- 1 surplatine Jumbo additionnelle en titane (TA6V ELI) pour une plus grande surface de contact avec l'os cortical.

Approche chirurgicale

- Compatible avec les techniques chirurgicales standards utilisées pour la reconstruction du LCA avec fixation corticale.



Platine :



Longueur : 12 mm
Largeur : 4 mm
Épaisseur : 1,3 mm
Méchage : 4,5 mm



Surplatine Jumbo (optionnelle) :

Longueur : 20 mm
Largeur : 5,5 mm
Épaisseur : 2,6 mm
Méchage supérieur ou égal à 5 mm







Mise en place au préalable de la surplatine Jumbo (option 1)

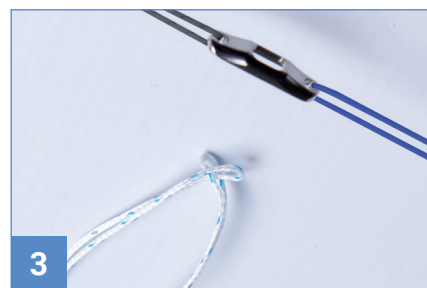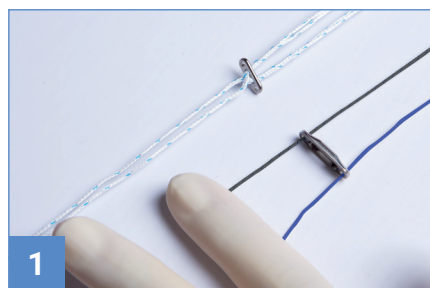

Retirer les fils de traction de la platine et les repositionner sur la surplatine afin de permettre sa mise en place.



Mise en place de la surplatine Jumbo avant serrage de l'implant (option 2)

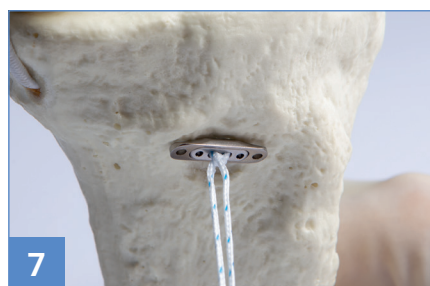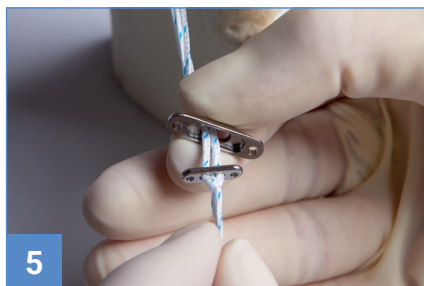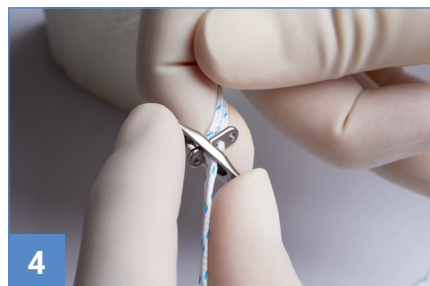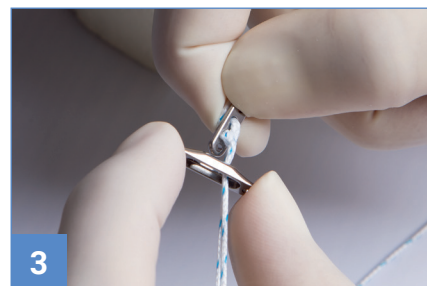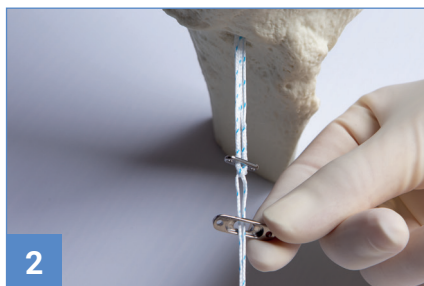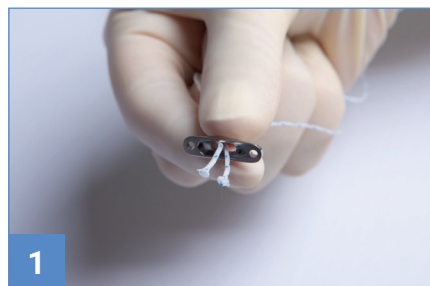

Réf.	Désignation
TM00140100	EXT LIFTFIX BUTTON TI
TM00130100	JUMBO BUTTON TI